


ルンダデンタル 歯科矯正用

矯正装置の上からコロコロ転がすだけで汚れをとります

歯面も矯正装置も一緒に磨けるので時間が短縮できます
ブラシの毛が細く柔らかいので矯正装置に絡まりません



1 Size
2 Color

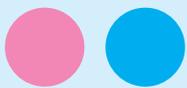

Runda Dental

for Orthodontic Apparatus

柄の材料	PCTG 樹脂
毛の材料	ナイロン
毛の細さ	0.076mm
耐熱温度	100℃

Made in Japan

販売元：株式会社クラーク
埼玉県八潮市柳之宮 223-2
048-994-1825




ルンダデンタル 歯科矯正用



15.5mm径の円状ブラシで歯面を奥の13.5mm径の円状ブラシで矯正装置をきれいにします

よく落ちる、秘密はここ 

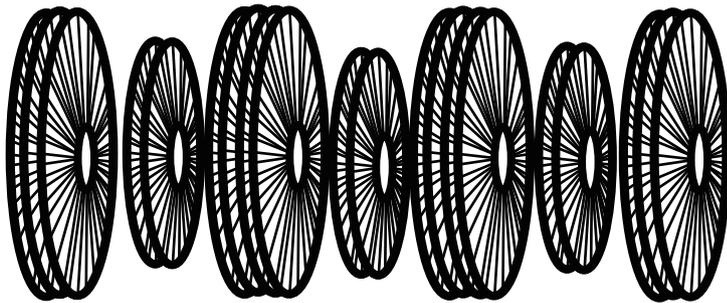

15.5mm径×3枚 15.5mm径×4枚 15.5mm径×4枚 15.5mm径×3枚
13.5mm径×2枚 13.5mm径×2枚 13.5mm径×2枚

15.5mm径のブラシ14枚
+
13.5mm径のブラシ6枚
||

合計20枚のブラシで矯正装置を包みこむ!

コロコロ転がせば矯正装置の下にも毛先が届いて清掃できます!



みがきかた

まずは、水だけで磨いてください。
歯磨き粉は仕上げとしてご使用ください。

- ① 矯正装置を包み込む様にブラシを当て転がします。ブラシの当たる角度を変えながら3~4歯のストロークで5~10回程往復させます。
- ② お口の中全体を転がします。前歯の内側はブラシを縦にして前後させると磨きやすいです。歯と歯茎の境目では、歯茎も一緒に磨いてください。



お取り扱いの注意事項

- こする方向(回らない方向)へのブラッシングは禁止。



- 転がすときの力の入れすぎに注意。軽く転がるぐらいで充分です。

まちがった清掃方法ではブラシの寿命が短くなる可能性があります。

販売元



埼玉県八潮市柳之宮 223-2
048-994-1825

